

PTMab[®]抗体定制

——助力更多全新科学发现！

服务特色

修饰抗体定制专家

可定制各种**新型酰化修饰**，如乳酸化、巴豆酰化、琥珀酰化等修饰抗体（已成功开发**>30**种修饰）。

超高的开发成功率

拥有十余年抗体开发经验，据过往三年定制项目统计结果，定制抗体开发成功率**>98%**。

助力高分文章发表

据 2021 年定制项目统计结果，相应文章影响因子平均值**>10**。

丰富的特殊物种定制经验

已为 **25** 种特殊物种（除人 / 小鼠 / 大鼠以外）成功开发定制抗体。


方案灵活 无忧服务

可定制兔多抗、鼠单抗和重组兔单抗；免疫周期，开发方案可按需调整。

一站式检测平台

根据客户要求，合理设计验证方案，可提供 **IP/ChIP/IHC/IF** 等实验验证服务。

开发流程（以重组兔单抗为例）

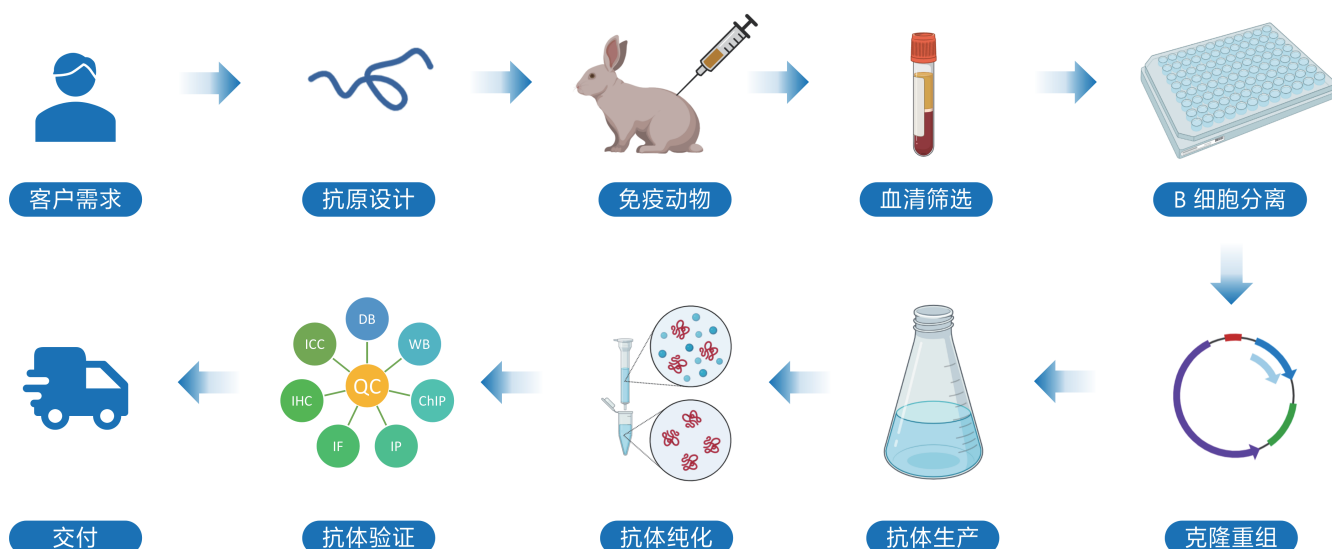

服务详情

抗体类型	靶点类型	项目类型	关键参数	周期(周)	交付标准
兔多抗	非修饰类	保证型	2条多肽	13-18	1、ELISA阳性；
			4只兔子		2、内源蛋白WB/IHC/ICC至少一种为阳性(不成功不收费)
	修饰类	非保证型	2条修饰多肽	13-19	1、ELISA阳性；
			1条非修饰多肽		2、Dot Blot阳性,主多肽/交叉信号>10；
			3只兔子		3、内源蛋白检测WB(可免费检测一次)
		保证型	2条修饰多肽	13-20	1、ELISA阳性；
			1条非修饰多肽		2、Dot Blot阳性,主多肽/交叉信号>10；
			6只兔子		3、内源蛋白WB/IHC/ICC至少一种为阳性(不成功不收费)
重组兔单抗	非修饰类	保证型	2条多肽	22-27	1、ELISA阳性；
			4只兔子		2、内源蛋白WB/IHC/ICC至少一种为阳性(不成功不收费)
	修饰类	保证型	2条修饰多肽	22-30	1、ELISA阳性；
			1条非修饰多肽		2、Dot Blot阳性,主多肽/交叉信号>10；
鼠单抗	非修饰类	保证型	2条多肽	22-28	1、ELISA阳性；
			4只小鼠		2、内源蛋白WB/IHC/ICC至少一种为阳性(不成功不收费)
	修饰类	保证型	2条修饰多肽	22-28	1、ELISA阳性；
			1条非修饰多肽		2、Dot Blot阳性,主多肽/交叉信号>10；
			6只小鼠		3、内源蛋白WB/IHC/ICC至少一种为阳性(不成功不收费)

保证型项目优势：

1、多肽单独免疫；

2、免疫动物数量增加；

3、抗体单独纯化；

4、交付标准高；

5、总成功率高。

杭州景杰生物科技股份有限公司

Tel:400-100-1145

地址:浙江省杭州市钱塘新区福城路291号生物医药港小镇二期8号楼

扫码填写抗体定制信息表

